



PHOENIX ANESTHESIA


Pousse Seringues TIVA

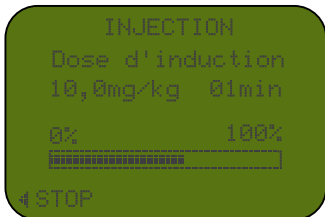


écran d'induction

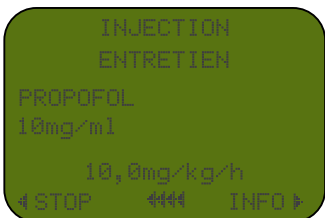

écran de maintenance

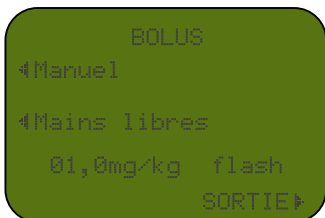

écran de sélection du mode bolus

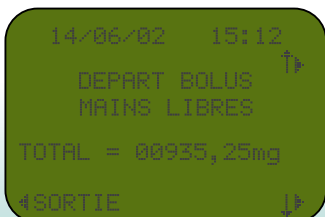

écran d'historique

Caractéristiques principales

20 protocoles agent IV comprenant

- nom de l'agent, concentration
- dose d'induction, durée d'induction
- débit de maintien
- dose bolus, durée bolus

5 protocoles à schéma de perfusion comprenant

- agent perfusé (parmi les 20 agents IV sélectionnables)
- débit et durée de chaque plateau (3 au maximum)

induction/bolus : débit réglable jusqu'à 1200 ml/h
concentration de l'agent : 1µg/ml - 99,9 mg/ml
poids du patient : 0,1 - 200,0 kg
seuils d'occlusion : 225/450/675/900 mmHg
(0,3/0,6/0,9/1,2 bar)

Mode Maître-Esclave de programmation ultra rapide
port série RS 232 pour imprimante
Impression des historiques sans raccordement à un ordinateur

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz
batterie 6 V (autonomie 6 h)

Dimensions : 272 x 130 x 170 mm
Poids : 3,3 Kg
Boîtier ABS antichoc
Options : imprimante thermique, câbles de liaison maître-esclave

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la gamme PHOENIX sans avis préalable. Cette plaquette ne pourra être considérée comme un document contractuel.

FOURÈS S.A.

DIVISION PERFUSION



L'anesthésie intraveineuse totale aussi simplement que vous le désirez

PHOENIX ANESTHESIA

Pousse Seringues TIVA



conforme à la directive 93/42/CEE

FOURES SAS, Division Perfusion

Voie romaine, parc Remora, 33173 GRADIGNAN FRANCE
Tél. (33) 05 56 89 26 60 - Fax (33) 05 56 89 54 42 - sasfores@foures.fr


Distribué par :

Ref : 905035528/A

L'anesthésie intraveineuse totale aussi simplement que vous le désirez

PHOENIX ANESTHESIA

PHOENIX ANESTHESIA

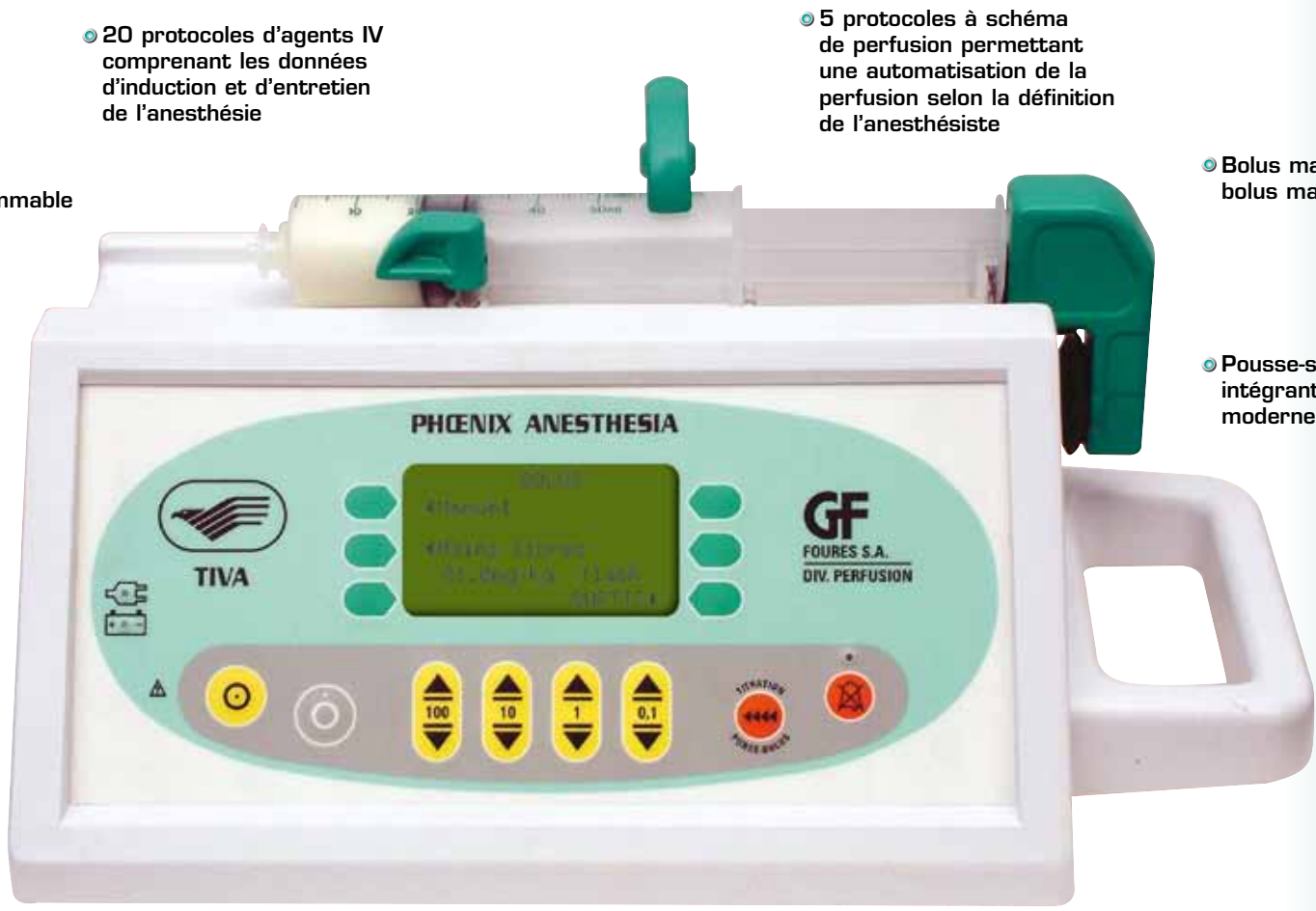

- 20 protocoles d'agents IV comprenant les données d'induction et d'entretien de l'anesthésie
- 5 protocoles à schéma de perfusion permettant une automatisation de la perfusion selon la définition de l'anesthésiste
- Bolus mains libres ou bolus manuel à débit réglable
- Pousse-seringues évolué intégrant les technologies modernes
- Historique complet d'événements (jusqu'à 1600 événements enregistrés)
- Contrôle permanent de la pression de perfusion
- Injection rapide ou programmable des inductions et bolus
- Construction ergonomique et robuste
- Changement du débit sans interruption de la perfusion
- Panneau de contrôle clair et intuitif grâce aux touches de fonctions placées autour de l'écran
- Mise en service simple et très rapide
- Liaison série RS 232 pour impression directe de l'historique sans raccordement à un ordinateur

FOURÈS S.A.
DIVISION PERFUSION



PHOENIX ANESTHESIA

TIVA Pump

Specifications

20 drug protocols including

- drug name, drug concentration
- induction dose, induction time
- maintenance rate
- bolus dose, bolus time

5 infusion scheme protocols including


- infused drug (among the 20 selectable drugs)
- maintenance rate and time for each stage (3 max)

induction/bolus rate : up to 1200 ml/h
drug concentration : 1 µg/ml - 99.9 mg/ml
patient weight : 0.1 - 200.0 kg
occlusion limits : 225/450/675/900 mmHg
(0.3/0.6/0.9/1.2 bar)


Master-Slave quick programming mode
RS 232 serial port for printer
History printing without the need of a computer

Power supply : 230 V - 50 Hz
internal battery - 6 hrs autonomy


Dimensions : 272 x 130 x 170 mm
Weight : 3.3 Kg
ABS case
Options : thermal printer, Master-Slave cable

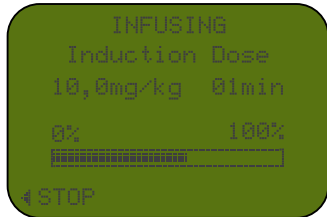


induction screen

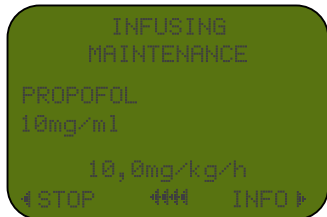

maintenance screen

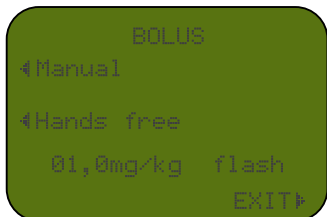

bolus mode selection screen

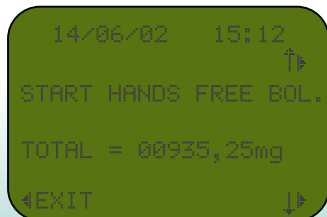

history screen



FOURÈS S.A.

INFUSION DEPARTMENT

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la gamme PHOENIX sans avis préalable. Cette plaquette ne pourra être considérée comme un document contractuel. DLG and Co. 06 56 22 83 70



Total Intravenous Anesthesia is now as easy as you can imagine

PHOENIX ANESTHESIA

TIVA Syringe Pump



This device complies with MDD 93/42/CEE

FOURES SAS, Infusion Department
Voie romaine, parc Remora, 33173 GRADIGNAN FRANCE
Tél. (33) 05 56 89 26 60 - Fax (33) 05 56 89 54 42 - sasfoures@foures.fr

Marketed by :

Ref : 905035529/A

Total Intravenous Anesthesia is now as easy as you can imagine

PHOENIX ANESTHESIA

PHOENIX ANESTHESIA



- Up to 20 drug protocols including induction and maintenance parameters for fast and easy infusion management
- Up to 5 scheme protocols automatizing drug administration according to doctor's infusion profiles
- Hands-free or hands-on bolus
- High performances syringe pump based on up-to-date technology
- Full events history (up to 1600 events)
- Back pressure permanent monitoring
- Fast and easy starting
- RS 232 serial port for direct printing of pump history
- Fast induction and bolus injections
- Ergonomic and strong design
- Rate changes without stopping infusion
- Clear and intuitive front panel

FOURÈS S.A.
INFUSION DEPARTMENT

